



Kit Control de Vía Aérea **i-gel[®] O₂**

Todo lo necesario para preparar, insertar y asegurar i-gel O₂



Gestión de vías aéreas ▪ Dispositivos para vías aéreas



En anestesia y urgencias, se necesitan dispositivos fáciles, rápidos y fiables de utilizar. El Kit Control de Vía Aérea i-gel® O₂ contiene todo lo necesario para preparar, insertar y asegurar i-gel® O₂ de manera rápida y eficiente: una cánula supraglótica i-gel® O₂, un sobre de lubricante, una cinta de fijación y una sonda de aspiración.


El Kit Control de Vía Aérea i-gel® O₂ incorpora un puerto de oxígeno adicional y un anillo de fijación para asegurar la cinta de sujeción.

i-gel® O₂ se ha diseñado para facilitar la ventilación como parte de los protocolos de resucitación estándar, como los designados por el Consejo Europeo de Reanimación (ERC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA). Además, i-gel® O₂ incorpora un puerto de oxígeno adicional, por lo que también puede utilizarse para la administración de oxigenación pasiva, o Gestión Pasiva de las Vías Aéreas (PAMTM), como parte de un protocolo adecuado de Reanimación Cardiocerebral (RCC).



Innovación en vías aéreas desde 2007

i-gel® es un dispositivo supraglótico innovador de segunda generación de Intersurgical lanzado en 2007. El primer gran avance desde la mascarilla laríngea, i-gel® cambió el concepto del manejo de la vía aérea y es ampliamente utilizada en anestesia y reanimación en todo el mundo.

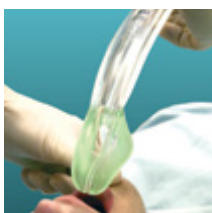

Almohadilla no-inflable

i-gel® toma el nombre del material suave “tipo gel” del que está fabricada. El uso de este innovador material ha permitido el desarrollo de una almohadilla no-inflable única. Esto significa que no es necesario desinflar la almohadilla antes de la

inserción, ni inflarla después de la colocación para asegurar el sellado, acortando y simplificando el procedimiento de preparación e inserción.

Inserción

i-gel® O₂ es asombrosamente fácil de utilizar. La inserción es rápida y normalmente se consigue en menos de 5 segundos. La técnica de inserción de i-gel® O₂ es tan sencilla, fiable e intuitiva, que el usuario no necesita introducir los dedos en la boca del paciente.

[Ver video](#)

Fijación

El Kit Control de Vía Aérea i-gel® O₂ incluye una cinta de fijación especialmente diseñada para asegurar la posición de i-gel® O₂. Esta sujeción se consigue fácilmente deslizando la cinta por debajo del cuello del paciente y asegurándola en el anillo de fijación ubicado en la parte superior de i-gel® O₂. Esta opción hace que su uso sea ideal en los casos donde la cinta adhesiva no es posible, tales como pacientes con barba.

[Ver video](#)



Kit Control de Vía Aérea i-gel® O₂

Conector 15mm

Conexión segura para cualquier conexión paciente o conector estándar

Extremo proximal del canal gástrico

Anillo de fijación con código de color

Para asegurar la posición de i-gel® O₂ con la cinta de fijación

Información del producto claramente visible

Para una clara referencia visual. Incluye información del tamaño y peso recomendado

Guía de posición

Puerto de oxígeno adicional

Para administración de oxigenación pasiva como componente del protocolo de resucitación cardiocerebral (CCR)

[Ver video](#)

Canal gástrico

Mejora y aumenta la seguridad del paciente frente a regurgitación

Pieza integrada de mordida

Reduce la posibilidad de oclusión de la vía aérea

Estabilizador de la cavidad bucal

Facilita la inserción y elimina el riesgo de rotación

Retenedor de la epiglotis

Reduce la posibilidad de repliegue de la epiglotis y de obstrucción de la vía aérea

Almohadilla no-inflable

Fabricada de un exclusivo material suave "tipo gel" que facilita la inserción y reduce el trauma

Extremo distal del canal gástrico



El Kit Control de Vía Aérea i-gel® O₂ está disponible en tres tamaños de adulto e incluye:

- Cánula supraglótica i-gel® O₂
- Sobre de lubricante para una rápida y fácil lubricación de i-gel O₂ antes de su inserción
- Cinta de fijación que asegura la posición de i-gel O₂
- Sonda de aspiración de 12FG para pasar por el canal gástrico y vaciar el contenido estomacal

[Ver video](#)



Información para pedidos

El Kit Control de Vía Aérea i-gel® O₂ contiene una cánula supraglótica i-gel® O₂, un sobre de lubricante, una cinta de fijación y una sonda de aspiración, en un envase transparente, estéril y rígido. Este empaquetado único protege el dispositivo durante el transporte y almacenamiento. i-gel® O₂ tiene un anillo de fijación con código de color para permitir una rápida y fácil identificación de la talla. El Kit Control de Vía Aérea i-gel® O₂ está disponible en tres tamaños de adulto.



Referencia	Descripción	Color	Peso	Uds./caja
8705000	Kit Control de Vía Aérea i-gel® O ₂ , adulto grande - Incluye una i-gel O ₂ tamaño 5 con anillo de fijación naranja, un sobre de lubricante, una cinta de fijación y una sonda de aspiración de 12FG	●	90+kg	6 
8704000	Kit Control de Vía Aérea i-gel® O ₂ , adulto mediano - Incluye una i-gel O ₂ tamaño 4 con anillo de fijación verde, un sobre de lubricante, una cinta de fijación y una sonda de aspiración de 12FG	●	50–90kg	6 
8703000	Kit Control de Vía Aérea i-gel® O ₂ , adulto pequeño - Incluye una i-gel O ₂ tamaño 3 con anillo de fijación amarillo, un sobre de lubricante, una cinta de fijación y una sonda de aspiración de 12FG	●	30–60kg	6 

[Consúltenos](#)
[Más información](#)

 Estéril

Nota: La sonda de aspiración contiene PVC

IS6.6 ES • Issue 10 07.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA