



Pieza en T con reservorio para reanimación




Oxígeno y Aerosolterapia ▪ Oxigenoterapia

Pieza en T con reservorio para reanimación

La pieza en T con reservorio para reanimación de Intersurgical ha sido diseñada para suministrar oxígeno suplementario durante el transporte y reanimación de pacientes postquirúrgicos en respiración espontánea con el dispositivo de vía aérea aún en uso. Su diseño ligero asegura una mínima tracción de la cánula supraglótica o del tubo endotraqueal del paciente. La bolsa reservorio proporciona una indicación audible y visual de la respiración.



% de oxígeno proporcionado a diferentes flujos*

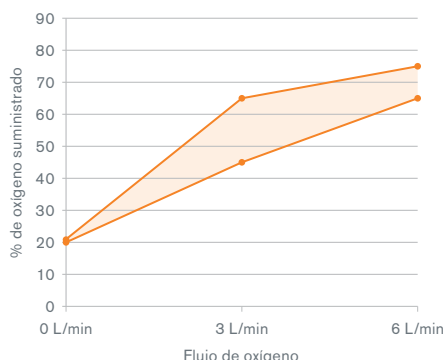

*Este es un dispositivo de suministro de oxígeno variable y, en consecuencia, la concentración de oxígeno dependerá del patrón respiratorio del paciente.

Referencias: Informe de estudio interno, pieza en T con reservorio para reanimación.



De un solo uso, libre de látex y ftalatos

Inflado y desinflado de la bolsa

proporciona una indicación visual de la respiración

Ligera

mínima tracción sobre el dispositivo de vía aérea

Material de la bolsa

proporciona una indicación audible de la respiración

La bolsa reservorio se llena de oxígeno durante la espiración para aumentar la concentración de oxígeno suministrada

Baja reinhalación de CO₂

Conector estándar de 15mm

permite su conexión a cánulas supraglóticas o tubos endotraqueales

Conector de 6mm

cumple la norma BS EN 13544-2, permite la conexión segura de la línea de oxígeno

www.intersurgical-es.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/oxygen-recovery-t-piece-with-reservoir-bag

Referencia	Descripción	Long. línea	Uds./caja
1041000	Pieza en T con reservorio para reanimación		100
1041001	Pieza en T con reservorio para reanimación con línea	2.1 m	40
1041002	Pieza en T con reservorio para reanimación con mascarilla Intersurgical EcoLite™ de oxígeno de concentración media de adulto con línea	2.1 m	55

Consúltenos

IS10.32 ES • Issue 5 09.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA