



nFlow™ CosyFit

Circuito para CPAP nasal neonatal



Cuidados Intensivos ▪ Circuitos respiratorios



nFlow™ CosyFit

Diseñado para el cuidado neonatal

Los pacientes más pequeños suelen ser los que más cuidados necesitan. La seguridad y la comodidad son vitales para ayudar a los bebés en sus primeros días vida.

Una alternativa para CPAP neonatal

El circuito nFlow™ de Intersurgical ofrece una solución completa para CPAP neonatal con tecnología “flip-gas”, proporcionando una alternativa de bajo trabajo respiratorio a los ventiladores de CPAP.

Soporte de tubo

Diseño ligero y seguro para facilitar la colocación y el ajuste

Cintas sujeción al gorro


Suaves y resistentes para mantener un ajuste cómodo y fiable durante todo el tratamiento

Gorro


Disponible en 12 tallas, el gorro de algodón transpirable nFlow CosyFit incluye 3 grandes zonas de fijación que ayudan a garantizar un ajuste suave y cómodo tanto en los pacientes más pequeños como en los más grandes.

Gorro CosyFit

El gorro CosyFit permite que la colocación del generador sea sencilla y precisa y ayuda a crear un ajuste seguro pero suave incluso en los pacientes más sensibles.

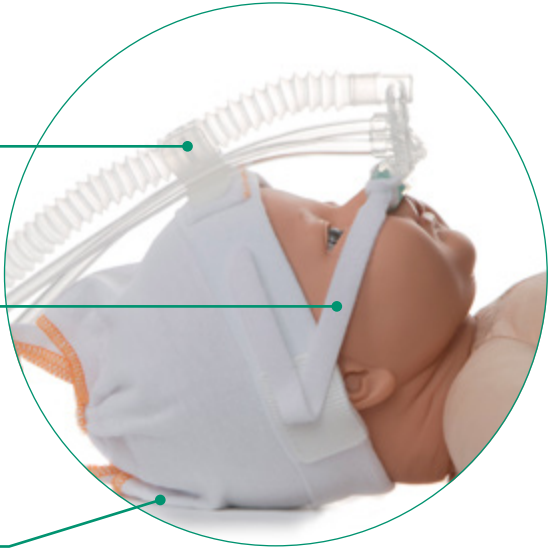

A

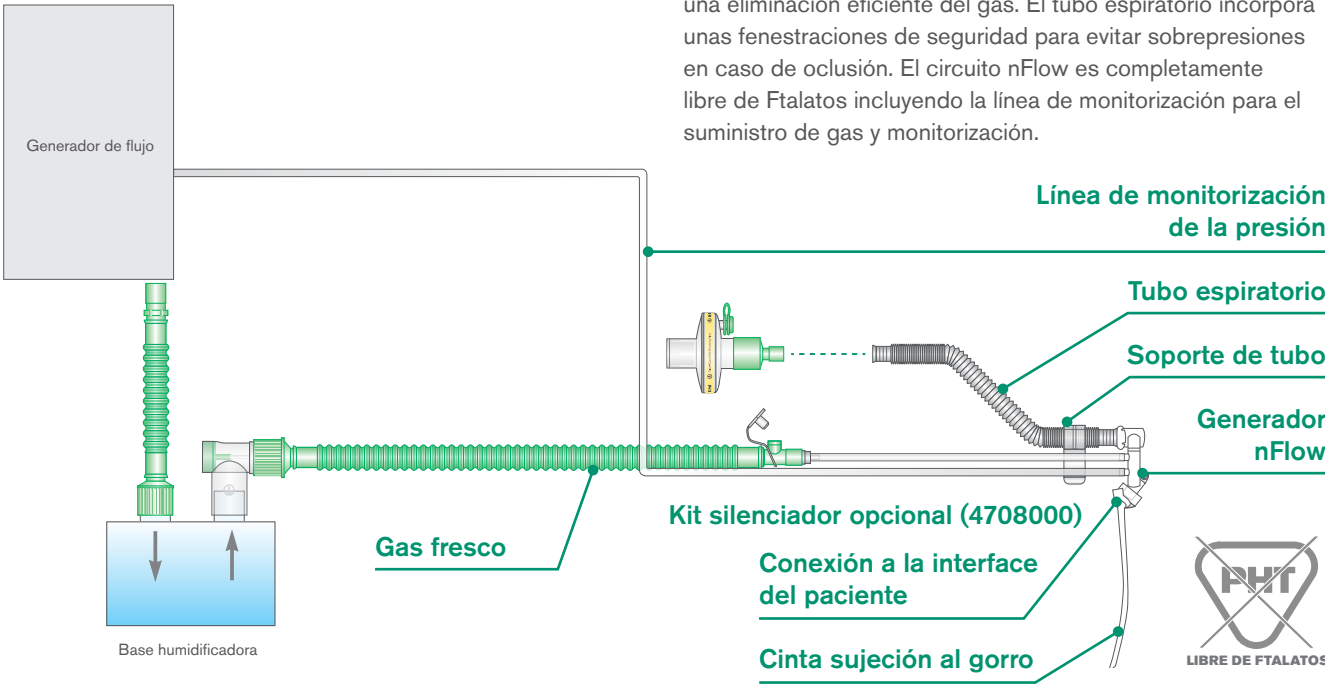


Circuito nFlow

El circuito nFlow se suministra con un generador de flujo, un ramal con cable calentador y un tubo espiratorio Superset para una eliminación eficiente del gas. El tubo espiratorio incorpora unas fenestraciones de seguridad para evitar sobrepresiones en caso de oclusión. El circuito nFlow es completamente libre de Ftalatos incluyendo la línea de monitorización para el suministro de gas y monitorización.

Amplia gama de interfaces y gorros

Las interfaces para el paciente y los gorros CosyFit se suministran por separado para reducir el gasto hospitalario. Utilice el indicador de tamaño suministrado para elegir la opción correcta en cada paciente.

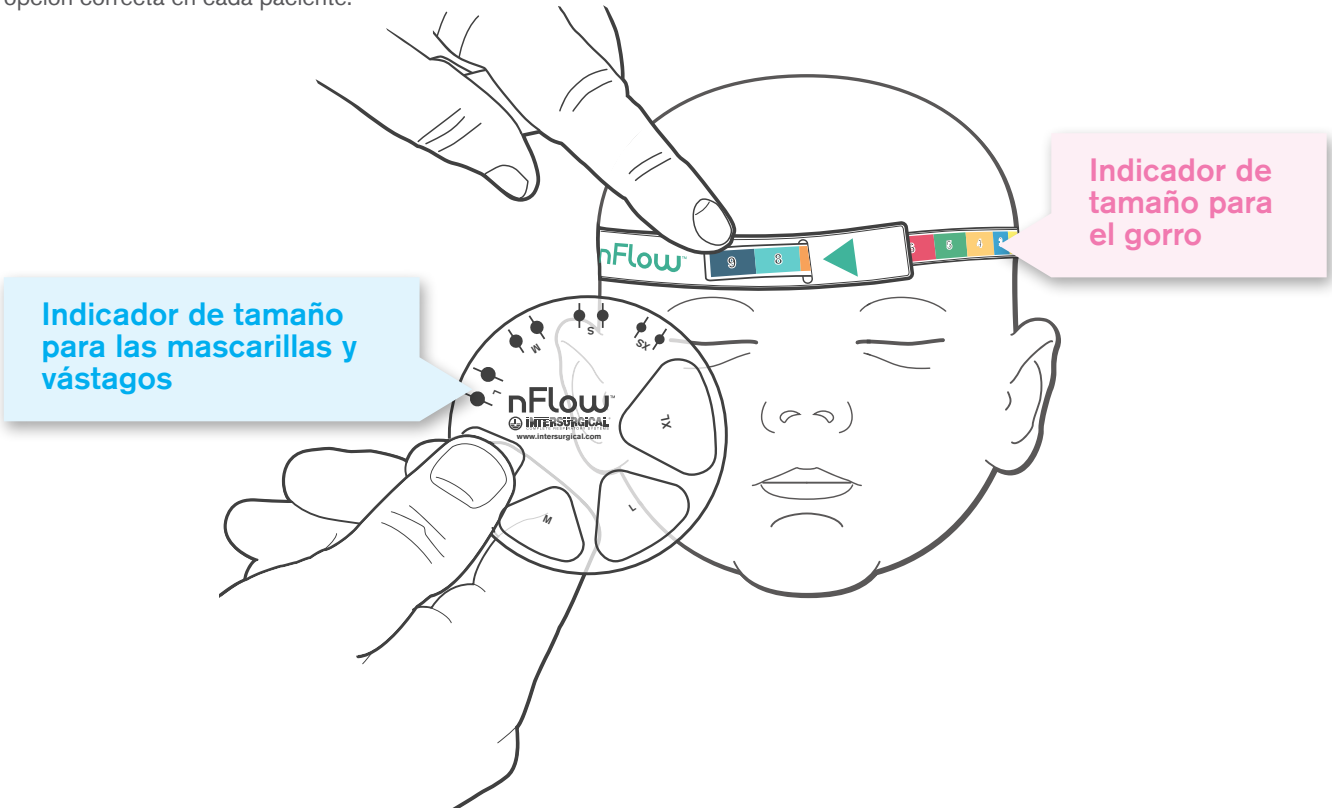

12 gorros

Disponibles por separado 12 tamaños de gorros con código de color. Cada gorro CosyFit incorpora 3 zonas de fijación para sujetar el soporte de tubo y las cintas de sujeción.


Interface para el paciente

Disponibles por separado 4 tamaños de mascarillas y vástagos. Fabricados en silicona muy suave y confortable para proporcionar un ajuste óptimo al paciente.





La selección de la configuración deseada es muy sencilla. Para configurar un sistema completo, seleccione una referencia de cada grupo: A, B, C y/o D. Todos los componentes pueden pedirse por separado de acuerdo a sus necesidades en cada momento.

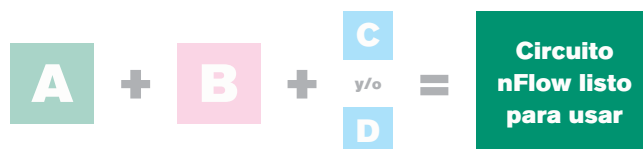

	Referencia	Descripción	Uds./caja
A	Circuitos respiratorios nFlow CosyFit		
	4800000	Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador. ≥ 1.6m	12
	4800001	Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador. ≥ 1.8m	10
	4800016	Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador y línea de monitorización desconectable. ≥ 1.8m	10
B	Gorros nFlow CosyFit		Tamaño
	4907009	Gorro nFlow CosyFit, azul marino	Tamaño 9 (40 - 42 cm) 10
	4907008	Gorro nFlow CosyFit, turquesa	Tamaño 8 (38 - 40 cm) 10
	4907007	Gorro nFlow CosyFit, naranja	Tamaño 7 (36 - 38 cm) 10
	4907006	Gorro nFlow CosyFit, rojo	Tamaño 6 (34 - 36 cm) 10
	4907005	Gorro nFlow CosyFit, verde	Tamaño 5 (32 - 34 cm) 20
	4907004	Gorro nFlow CosyFit, naranja claro	Tamaño 4 (30 - 32 cm) 20
	4907003	Gorro nFlow CosyFit, azul	Tamaño 3 (28 - 30 cm) 20
	4907002	Gorro nFlow CosyFit, amarillo	Tamaño 2 (26 - 28 cm) 20
	4907001	Gorro nFlow CosyFit, gris oscuro	Tamaño 1 (24 - 26 cm) 20
	4907110	Gorro nFlow CosyFit, rosa	Tamaño 0 (22 - 24 cm) 20
	4907100	Gorro nFlow CosyFit, gris	Tamaño 00 (20 - 22 cm) 20
	4907000	Gorro nFlow CosyFit, blanco	Tamaño 000 (18 - 20 cm) 20
C	Mascarillas nasales nFlow		Tamaño
	4716000	Mascarilla nasal nFlow	Extra grande 30
	4706000	Mascarilla nasal nFlow	Grande 30
	4705000	Mascarilla nasal nFlow	Mediano 30
	4704000	Mascarilla nasal nFlow	Pequeño 30
D	Vástagos nasales nFlow		Tamaño
	4703000	Vástago nasal nFlow	Grande 30
	4702000	Vástago nasal nFlow	Mediano 30
	4701000	Vástago nasal nFlow	Pequeño 30
	4711000	Vástago nasal nFlow	Extra Pequeño 30

Nota: No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Para más información, contacte con su oficina local.

IS1.59 ES • issue 4 01.26



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • India • Ireland • Italy
Japan • Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA